

# SURFANIOS Premium

Puhastava toimega  
desinfektsioonivahend  
pindadele



- Kahekordne toime: desinfektsiooni- ja puhastusvahendi sünergilise toime kombinatsioon
- Efektne haiglateskonnast isoleeritud bakterite ja seente vastu
- Aldehüüdivaba
- Optimeeritud ökotoksiline koostis

## NÄIDUSTUSED

Meditsiiniseadmete, seinte ja põrandate puhastamine ja desinfitseerimine.

## OMADUSED:

- Rohelist värvi vedelik
- Kõrge pH: 11,2
- Lahuse pH (0,25%) u 8x 8
- Tihedus: 1,007
- Refraktsiooni indeks: 1,3587


LAHUSTADA  
20 ml → 8 L



# SURFANIOS Premium

Puhastava toimega desinfektsioonivahend pindadele

## KASUTAMINE

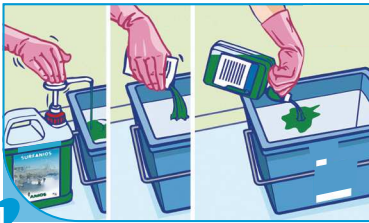

1 Täita ämber 8l veega. Valmistada 0,25% lahus: valades 20ml SurfaniOS Premiumi vette.



2 Pesta lahusega üle puhastatavad pinnad jälgides toimeaega. Mitte loputada.



3 Põrandapesu moppi vahetada nii tihti kui vajalik, asetades saastunud mopp selleks ettenähtud nõusse.



4 Vahetada põrandapesu moppi vähemalt igas uues puhastatavas piirkonnas ja lahuse vahetamisel.

DiaWipes Dry Systemis kasutamine:

Valmistada 1% lahus e lisada 10ml kontsentrati 1000ml veele. Lahus säilib 30 päeva.

## KOOSTIS

N-(3-aminopropüül)-N-dodetsüülpropan-1,3-diamiin  
– CAS 2372-82-9 (51mg/g), didetsüülmetüülammooniumkloriid  
– CAS 7173-51-5 (25 mg/g), abiained.

## HOIATUSED

Jälgi kasutusjuhendis ja ohutuskaardil märgitud ettevaatusabinõusid. Toode kvalifitseerub vastavalt EL Direktiivile 99/45/EEC ja selle lisadele ohtlike kemikaalide hulka. Säilitamine: +5°C - +30°C.

## PAKEND

**SURFANIOS Premium**

- 1 20ml ühekordne pakend
- 2 1l doseerimispudel
- 3 5l kanister (doseerimispumbaga)

## MIKROBIOLOOGILINE SPEKTER

Mille vastu	Standardid	Kontaktiaeg		
		0,25%	0,5%	1%
Bakterid	EN 1040, EN 1276, EN 13727	5 min.		
	BMR (EN 1276)	5 min.		
	EN 13697	30 min.	15 min.	
	BMR (EN 13697)	15 min.		
Mükobakterid	Mycobacterium terrae (EN 14348)	60 min.	30 min.	
	Mycobacterium terrae (EN 14563)	60 min.	30 min.	
Seened/pärmid	EN 1275, EN 1650	15 min.		
	EN 13697	30 min.	15 min.	
Hallitusseened	EN 1275	15 min.		
	EN 13697	30 min.		15 min.
	EN 1650	120 min.		
Viirused	EN 14476: HIV-1, PRV (HBV surrogaat), BVDV (HCV surrogaat) ja herpesviirus	5 min.		
	Vacciniavirus	60 min.	15 min.	

