



DESINFITSEERIV JA PUHASTAV VAHT KIRURGILISTELE INSTRUMENTIDELE

Aniosyme Prime

DESINFITSEERIV JA PUHASTAV VAHT INSTRUMENTIDE EEL-TÖÖTLEMISEKS

- Koostises on kombineeritud kaks patenteeritud efektiivsust
- Ennetab mustuse kuivamist
- Antimikroobne toime alates 15 minutist
- Tihe vaht: instrumendid kattuvad ühtlaselt
- Lai materjalisobivus



Aniosyme Prime


Puhastav ja desinfitseeriv vaht instrumentide eel-
töötlemiseks

KASUTUSVALDKOND


Ready-to-use pre-treatment disinfectant detergent foam for optimised dissolving of contamination on instruments with longer standing times (up to 72 hours) or before machine processing.

Prevents drying out of contamination and makes pre-cleaning easier with a good cleaning effect. The thick foam guarantees even coverage of the instrument surface. Aniosyme Prime is compatible with a wide variety of materials. Not suitable for instruments made of zinc or iron.


KASUTUSJUHEND

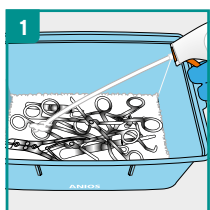


1 Beforehand, spray the bottom of the soaking tray with Aniosyme Prime and place instruments collected.

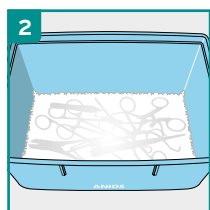

2 Re-cover all the instruments with foam. Minimum contact time in the system: 15 minutes. For tuberculocidal activity, allow 30 minutes contact time.

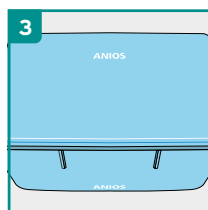

3 Cover the tray with the lid.

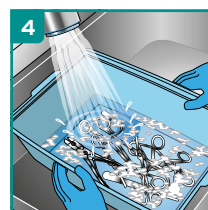

4 Thoroughly rinse treated medical devices with tap water to remove all traces of product and organic soiling before machine or manual cleaning.

MIKROBIOLOOGILISED OMADUSED

EFEKTIIVSUS / TINGIMUSED	KONTAKTIAEG
Bakteritsiidne EN 13727 ja EN 14561, saastunud tingimused	15 min
Pärmitsiidne EN 13624 ja EN 14562, saastunud tingimused	15 min
Tuberkulotsiidne EN 14348 ja EN 14563, saastunud tingimused	30 min
Mükobakteritsiidne EN 14348 ja EN 14563, saastunud tingimused	60 min
Efektiivsus ümbrisega viirustesse EN 14476 / EN 17111, saastunud tingimused	15 min

PAKEND JA INFO TELLIMISEKS

TOODE	PAKEND	KOOD
Aniosyme Prime	12 x 750ml pudelit	2367.544

MAALETOOJA: SEMETRON AS,
Veerenni 51, Tallinn



CE
0459

LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distributed by:
LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

ECOLAB

LABORATOIRES ANIOS
An Ecolab Company

KASUTUSVALDKOND

Pre-treatment of surgical instrumentation in foam: during a dry mode of transport or during storage of soiled instruments before machine or manual washing. Maintains an adequate level of humidity to avoid blood and other organic materials drying.

KASUTUSJUHEND

Ready-to-use solution.

1. Beforehand, spray the bottom of the soaking tray with Aniosyme Prime and place instruments collected.
2. Re-cover all the instruments with foam. Minimum contact time in the system: 15 minutes. For tuberculocidal activity, allow 30 minutes contact time.
3. Cover the tray with the lid.
4. Thoroughly rinse treated medical devices with tap water to remove all traces of product and organic soiling before machine or manual cleaning.

Not suitable for instruments made of zinc or iron.

KOOSTIS

Kvaternaarammoonium karbonaat, anioonsed pindaktiivsed ained, ensüümide kompleks (proteas, lipaas, amülaas).

SÄILITAMINE

Dangerous - respect the precautions for use (drawn up according to the European rules in force regarding the classification and labelling of chemical products). Storage: between +5°C and +25°C.

SERTIFIKAADID

Medical device. Full antimicrobial activity for Aniosyme Prime is included in the scientific dossier, available on request.

KASUTA MEDITSIINISEADMEID TURVALISELT

Enne kasutamist luge läbi kasutusjuhend ja etikett.



AINULT PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS.